

Univox® AutoLoop

Volautomatische ringleidingversterker voor
TV/muziek/microfoon

Gebruikshandleiding



Univox®AutoLoop



Kamerlus



Banklus



Inductie onderlegger

Inhoud

Introductie	3
Productoverzicht	3
Audiobronnen aansluiten	4
Een audiobron aansluiten	4
Flatscreen tv-verbinding	4
De lus aansluiten	4
De Kamerlus draad aansluiten	4
De Inductie onderlegger of Banklus aansluiten	5
Netaansluiting	5
Instellingen	5
Onderhoud	5
Problemen oplossen	5
Service	6
Milieu	6
Accessoires	6
De Univox AutoLoop	7

Introductie

Wij danken u dat u voor een Univox® product hebt gekozen en hopen dat u tevreden zult zijn. De Univox® AutoLoop is een volautomatische ringleidingversterker voor draadloos luisteren door uw hoortoestel. Sluit uw televisie, stereo, MP3, microfoon of enige andere audiobron met een 3,5 mm connector aan op de AutoLoop.


In de Univox® AutoLoop box vindt u een ringleidingversterker, een netadapter en de door u gekozen lus oplossing (zie de afbeeldingen op de voorpagina). De bijbehorende accessoires voor dit product vindt u in het hoofdstuk Accessoires.

Gelieve deze gebruikshandleiding aandachtig te lezen alvorens dit product aan te sluiten en te gebruiken. Alle Univox® versterkers hebben een zeer hoog uitgangsvermogen waardoor deze producten krachtig en betrouwbaar zijn en aan de bestaande IEC 60118-4 standaarden voldoen.

Productoverzicht



↑
Functie-indicator (geplaatst onder de versterker bij de voorzijde)

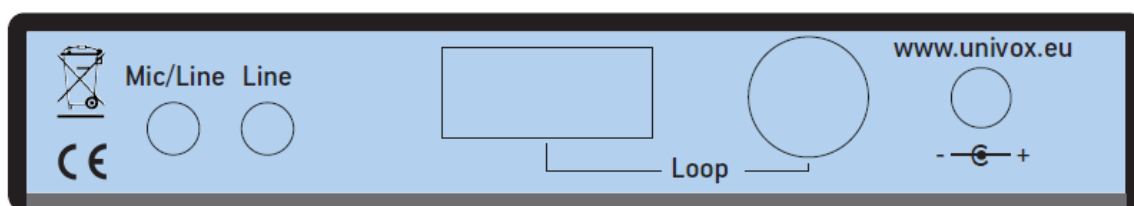

Audio ingang 3,5 mm mic/lijn

Kamerlus

Inductie onderlegger/
Banklus

Netadapter

Audiobronnen aansluiten

Een audiobron aansluiten

Sluit uw audiobron(nen) aan op één van de twee 3,5 mm mini-jack ingangen aan de achterkant.

- Voor microfoons, gebruikt u in principe de linker ingang gemarkeerd met Mic/Line.
- Voor andere audiobronnen, gebruikt u in principe de rechter ingang gemarkeerd met Line.
- Indien u twee microfoons of twee audiobronnen hebt, sluit u de tweede bron gewoon aan op de andere ingang.

Let op: indien u denkt dat de geluidskwaliteit niet goed is of deze niet naar tevredenheid is, sluit uw audiobron dan aan op de andere ingang om te testen of dit het resultaat verbetert. Dit is niet schadelijk voor de apparatuur. Gebruik een adapter indien uw audiobron niet is uitgerust met een 3,5 mm mini-jack.

Flatscreen tv-verbinding

Bij het aansluiten van een ringleidingversterker op een flatscreen televisie, kan er een lichte vertraging optreden tussen het geluid van de luidspreker van de televisie en het geluidssignaal van de SCART/audio uitgang van de televisie.

Om het echo-effect dat vanwege dit tijdsverschil kan ontstaan te vermijden, dient u het geluid in de lus te vertragen om het synchroon te maken met het geluid van de luidsprekers. Indien dit het geval is bij uw televisie, gebruik dan Univox® televisie Sync. Sluit de audiobron aan op de Sync's 3,5 mm ingang van de televisie of met de SCART-aansluiting. Sluit vervolgens de Sync's 3,5 mm connector van de televisie aan op de lijningang van de Autoloop.

De lus aansluiten

De Kamerlus draad aansluiten

Trek de lusdraad uit (0,75 mm²) en leg deze rondom het luistergebied. Bevestig de draad op vloerniveau of plafondhoogte (ongeveer 2,4 m / 8ft). De kamerlus draadrol wordt geleverd met 50 bevestigingsklemmen.

De draad mag ook op andere manieren worden bevestigd. Sluit de uiteinden van de draad aan op de linker veerklem-aansluiting van de twee connectoren op de achterkant van de versterker gemarkeerd met 'Loop'.

De Inductie onderlegger of Banklus aansluiten

Plaats de inductie onderlegger op uw zitting, op of onder het kussen. De Banklus wordt rond de bank op de vloer gelegd, bijvoorbeeld onder een kleed. Zorg ervoor dat u hoofdkabel zo legt, dat niemand over de kabel struikelt. Sluit de DIN-connector van de inductie onderlegger/banklus aan op de DIN-aansluiting op de achterkant van de versterker.

Netvoeding

Sluit eerst de netadapter aan op de gemarkeerde aansluiting op de versterker. Steek de adapter vervolgens in het stopcontact.

Instellingen

Univox® AutoLoop werkt volledig automatisch. Er hoeft niets te worden ingeregeld.

Onderhoud

Onder normale omstandigheden hebben Univox® ringleidingversterkers geen speciaal onderhoud nodig. Mocht het apparaat vuil worden, neem het apparaat dan af met een licht vochtige doek. Geen oplosmiddelen of zware reinigingsmiddelen gebruiken.

Problemen oplossen

Indien de ringleidingversterker niet naar tevredenheid functioneert, controleer dan het volgende:

- Zorg eerst dat uw hoortoestel op de T-stand staat en dat de ringleidingversterker op de netspanning is aangesloten.
- Brandt de “Functie-indicator”? Zo niet, controleer dan of de audiobron is aangesloten en een signaal uitzendt. Indien de audiobron is aangesloten en een signaal uitzendt en de “Functie-indicator” toch niet brandt, dan werkt de versterker niet correct en dient u verder te lezen in hoofdstuk Service van deze gebruiksaanwijzing.
- Indien de “Functie-indicator” brandt maar u toch geen signaal ontvangt met uw hoortoestel, is de inductie onderlegger/ banklus/ lusedraad niet of niet correct aangesloten. Zorg ervoor dat deze correct is aangesloten.

Service

Indien het product niet werkt na het uitvoeren van de hierboven beschreven controles, neemt u dan contact op met de plaatselijke distributeur van het product voor verdere instructies. Indien het product naar Bo Edin AB dient te worden opgestuurd, voeg dan een ingevuld Serviceformulier bij. Dit kunt u downloaden van www.edin.se, Support.

Technische informatie

Voor extra informatie raadpleegt u de productinformatie/ brochure en het CE-certificaat dat u kunt downloaden van www.univox.eu, Downloads. Indien nodig, kunt u een lijst van reserveonderdelen of andere technische documenten bestellen via support@edin.se.

Milieu

Wanneer u dit product wilt afvoeren nadat het einde van zijn levenscyclus is bereikt, doet u dit dan volgens de lokaal geldende regels voor het aanbieden van afval. Het respecteren van het afvalbeleid is belangrijk voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.

Accessoires

Onderdeel Nr. Beschrijving

283002	Inductie onderlegger 400x400x5mm, 10m kabel, grijs
283210	Verlengkabel voor Inductie onderlegger, 10m, grijs
283220	Banklus, 8m, incl. 10m verlengkabel, zwart
283240	Kamerlus, 30m rol, incl. 50 clips, lichtgrijs
203060	Televisie Sync, audiosynchronisatie voor flatscreen tv
281015	Audioconversiekabel, 3,5 mm mini/jack naar 2xRCA mini/jack, 1,5 m kabel
282009	Dubbele jack voor twee inductie onderleggers, 3,5 mm mini/jack naar 2xRCA aansluitingen
242401	Speaker microfoon 13A, zelfklevend klittenband, 3,5 mm mini/jack, 1,8 m kabel
241205	Handmicrofoon JTS NX-9, XLR mini/jack, geen kabel
281016	Microfoonkabel voor JTS NX-9, XLR aansluiting naar 3,5 mm mini/jack, 2,5 m kabel
581050	Dasspeldmicrofoon, 3,5 mm mini/jack, 1.1m kabel
241501	Grensvlak microfoon 13T, 3,5 mm mini/jack, 3m kabel
241601	Zwanenhals microfoon M-1, 3,5 mm mini/jack, 1,5 m kabel

Univox© AutoLoop

Onderdeel Nr. Beschrijving

201510P	Univox© AutoLoop EU met inductie onderlegger
201510R	Univox©AutoLoop EU met kamerlus
201510S	Univox©AutoLoop EU met banklus
201540P	Univox©AutoLoop UK met inductie onderlegger
201540R	Univox©AutoLoop UK met kamerlus
201540S	Univox©AutoLoop UK met banklus
201560P	Univox©AutoLoop US met inductie onderlegger
201560R	Univox©AutoLoop US met kamerlus
201560S	Univox©AutoLoop US met banklus
201580P	Univox©AutoLoop AUS met inductie onderlegger
201580R	Univox©AutoLoop AUS met kamerlus
201580S	Univox©AutoLoop AUS met banklus



Distributeur

Univox by edin, wereldwijd de belangrijkste expert en producent van hoogwaardige audio ringleidingsystemen, ontwikkelde de eerste echte ringleidingversterker in 1969. Sindsdien is het onze missie om de luistergemeenschap van dienst te zijn met de beste service en zijn onze prestatie-eisen sterk gefocust op Onderzoek en Ontwikkeling voor nieuwe technische oplossingen.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, SE-181 75 Lidingö, Zweden

| www.univox.eu

Hearing excellence since 1965

